


Уральский  
биомедицинский кластер

# АНАЛИЗАТОР БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЮНОНА<sup>®</sup> LABSTAR 50

Лучшее решение для вашей лаборатории

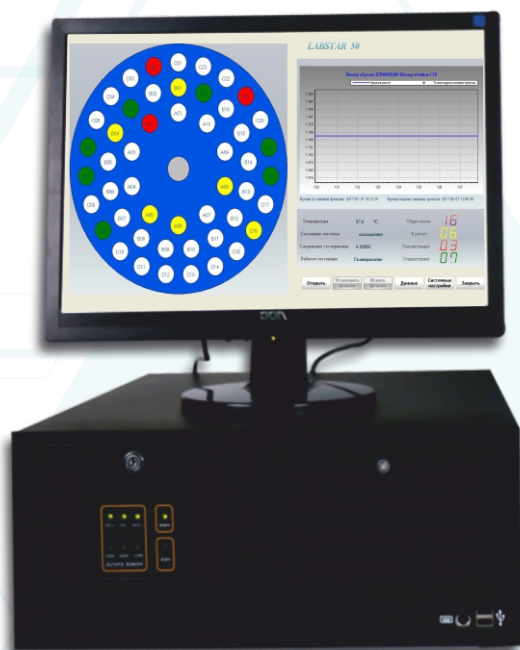

Современное программное обеспечение позволяет осуществлять непрерывный мониторинг каждого отдельного флакона

Оптимальный вариант по производительности для средней и небольшой лаборатории

Ускорение лабораторного цикла обследования пациента



## Автоматическая система мониторинга

- 50 независимых позиций дают возможность устанавливать флакон в любое время без влияния на результат
- Роторная, непрерывная система культивирования, позволяет максимально ускорить период детекции положительных флаконов и выявить широкий спектр микроорганизмов, включая бактерии и грибы
- Использование штрих-кода предназначено для установки флаконов, двойной дизайн штрих-кода создан для обеспечения соответствия образца и отчета

## Удобство для пользователя

- Исследование крови или других в норме стерильных биологических жидкостей
- Визуальное отображение кривой роста в режиме «реального времени»

## Максимально эффективная детекция каждого флакона

- Независимый сенсорный датчик для каждого круга
- Цикл работы анализатора 10 минут
- Время обнаружения положительных образцов от 6 до 24 часов



## Эффективное и простое использование питательных сред

- Использование адсорбционной смолы позволяет нейтрализовать антибиотики в образце и обеспечить эффективное культивирование
- Флаконы из полимерного материала обеспечивают безопасное использование, значительно снижают риск случайных разливов, порезов пользователя и микробной контаминации
- Вдвое легче стеклянных аналогов, что значительно упрощает процесс утилизации и транспортировки

## Простота в эксплуатации и обслуживании

Процедура исследования состоит из двух шагов: сканирование штрих-кода на этикетке и загрузка в анализатор, что значительно сокращает время, делая работу персонала более эффективной. Русифицированное меню обеспечивает удобство использования предустановленной программы



МЕДИКА ГРУПП

620028, г. Екатеринбург, ул. Кирова, д.28/1

тел.: +7 (343) 270-75-17

115054, Москва, ул.Дубининская, дом 71, стр.2

тел.: +7 (495) 137-53-68

наш сайт: <https://medicagroup.ru>

горячая линия: 8 (800) 505-53-07